


Patentierte Schutz-Verpackungslösung SMARTtainer®

Das Instrumentensieb wird in ein Sterilisiervlies eingeschlagen. Anschließend wird das verpackte Instrumentensieb in einen SMARTtainer® gelegt. Das Instrumentensieb wird nun mit dem SMARTtainer® sterilisiert, transportiert und eingelagert. Erst unmittelbar vor der Benutzung im OP wird der SMARTtainer® entfernt.



SMARTtainer®

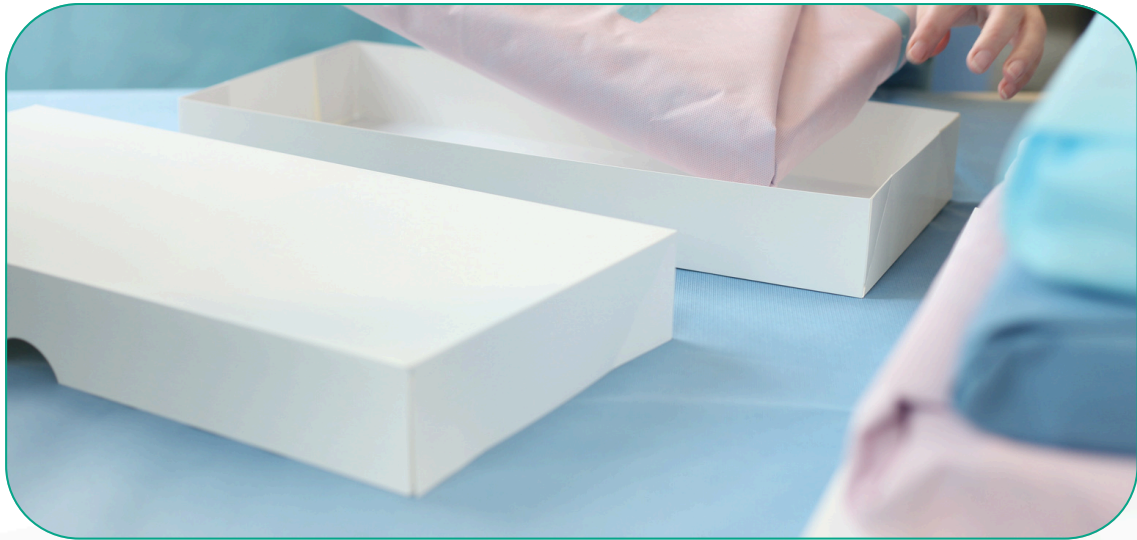

SCHÜTZT IHR STERILGUT VOR BESCHÄDIGUNGEN, NÄSSE UND KONTAMINATION

Beschädigung und Kontamination von Sterilbarrieressystemen

- Problem: Beschädigungen durch unsachgemäßen Transport und Lagerung führen zur Kontamination Ihres Sterilgutes.
- Lösung durch SMARTtainer®: Das Sterilisiervlies bleibt innerhalb des SMARTtainers vom Verpacken in der AEMP bis zum Auspacken im OP geschützt. So ist Ihr Sterilgut sicher vor Beschädigungen und Kontamination geschützt.



SMARTtainer®



GARANTIERT TROCKENE SIEBE, MAXIMALE UNTERSTÜTZUNG DES TROCKNUNGSPROZESSES

Feuchtigkeit und Kondensatrückstände

- Problem: Kondensatrückstände in Sterilgutverpackungen führen oft zu Durchnässung, die das Risiko von Keimwachstum erhöht und die Sterilität gefährden kann.
- Lösung durch SMARTtainer®: Der sterilisierfähige Spezialkarton des SMARTtainers® unterstützt das Trocknen von Kondensatresten durch seine physikalischen Eigenschaften, wodurch trockene Siebe gewährleistet sind.



SMARTtainer®



OPTIMIERT DIE RAUMNUTZUNG IN IHRER STERILISIERKAMMER, IM STERILGUTLAGER UND IM OP

Platzmangel

- Problem: Kliniken leiden ständig unter Platzmangel in der AEMP, im Sterilgutlager und im OP. Das führt zu Stress und ineffizienten Arbeitsabläufen.
- Lösung durch SMARTtainer® : Instrumentensiebe im SMARTtainer können problemlos gestapelt werden, was eine optimale Raumnutzung in der Sterilisierkammer, im OP-Lager und im OP ermöglicht.



SMARTtainer®



SPART ZEIT UND KOSTEN BEI DER AUFBEREITUNG

Hoher Aufwand bei der Aufbereitung von Sterilisiercontainern

- Problem: Das maschinelle oder manuelle Aufbereiten von Sterilisiercontainern und Transportkörben ist zeitaufwendig und kostspielig.
- Lösung durch SMARTtainer® : Der Einsatz des SMARTtainers® eliminiert den aufwendigen Prozess der Aufbereitung von Metallbehältern, was Zeit und Kosten spart. Mit dem SMARTtainer sparen Sie Ihre CWA ein, Wasser, Energie, Reinigungschemie, Personal, Platz, ...



SMARTtainer®



SCHONT DIE UMWELT DURCH NACHHALTIGE MATERIALIEN

Umweltbelastung durch Aufbereitung von Metallcontainern

- Problem: Die Aufbereitung von Metallcontainern erfordert erhebliche Mengen an Ressourcen wie Energie, Wasser und Reinigungschemie, was zu einer erhöhten Umweltbelastung führt.
- Lösung durch SMARTtainer®: Der für SMARTtainer® verwendete Spezialkarton kann im Altpapier entsorgt werden, was den Kreislauf der Wertstoffe unterstützt. Dadurch werden Ressourcen und die Umwelt geschont, weil keine Metallcontainer mehr aufbereitet werden müssen.



Technisches Datenblatt

SMARTtainer®

Art. Nr.	S: 1302626 M: 1205026 XL: 1200013 Robotik 1: 1526742 Robotik 2: 1526710
Beschreibung	Sterilisierfähige Schutzverpackung zur Aufnahme, Transport und Lagerung von Medizinprodukten in Ihren Sterilbarriersystemen
Hauptbestandteile	Zellulose
Verpackungseinheit	S: 50 Stk M: 50 Stk XL: 50 Stk Robotik 1: 50 Stk
Größe	(S) : 266 x 266 x 74 mm (M) : 526 x 266 x 74 mm (XL) : 603 x 293 x 80 mm (Robotik 1) : 670 x 420 x 100 mm (Robotik 2) : 670 x 160 x 100 mm Weitere Formate erhalten Sie gerne auf Anfrage
Verpackung	Wellkarton
Hersteller	SMARTmed GmbH Borsigstr. 1 D-51381 Leverkusen
Standard / Normen	Schutzverpackung für Medizinprodukte in Ihren Sterilbarriersystemen gemäß DIN EN ISO 11607

Kontaktieren Sie uns:

Für weitere Informationen und individuelle Anfragen besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie uns direkt.





IHR STERILGUT IMMER SICHER • IMMER TROCKEN • IMMER SMARTMED

Formate SMARTtainer, Stand 23.10.2025

SMARTtainer®

Art.Nr. 1302626, Größe „S“

Format Boden: 261 x 261 x 74 mm

Format Deckel: 266 x 266 x 74 mm

Art.Nr. 1205026, Größe „M“

Format Boden: 521 x 261 x 74 mm

Format Deckel: 526 x 266 x 74 mm

Art.Nr. 1200013, Größe „XL“ oder intern auch „HDTV“

Format Boden: 600 x 290 x 80 mm

Format: Deckel: 603 x 293 x 80 mm

Art.Nr. 1526742, Größe „Robotik 1“

Format Boden: 670 x 420 x 100 mm

Format: Deckel: 675 x 425 x 100 mm

Art.Nr. 1526710, Größe „Robotik 2“

Format Boden: 670 x 160 x 100 mm

Format: Deckel: 675 x 165 x 100 mm

Kontaktieren Sie uns:

Für weitere Informationen und individuelle Anfragen besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie uns direkt.





SMARTmed

IHR STERILGUT IMMER SICHER • IMMER TROCKEN • IMMER SMARTMED

Fon +49 (0)2161 30 41 771
info@smartmed-gmbh.de
www.smartmed-gmbh.de